


PRO CLEAN
IMPULSE
KID



RO Instrucțiuni de utilizare

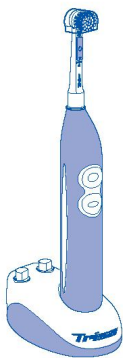

Unic importator: s.c. ZASS ROMANIA s.r.l.
(RO15328988), Str. Coșbuc nr. 4, cod 540120

Targu Mureș, jud. Mureș, România
Telefon / Fax: 0265-262870, 0265-269209
www.zassromania.ro, www.trisaelvetia.ro

office@zass.ro, office@trisaelvetia.ro

Producător: TRISONIC, ELVEȚIA
PRODUS FABRICAT ÎN ELVEȚIA

Prezentare produs (fig. A)

1. Periuță electrică cu acumulator încorporat
2. Buton oprire
3. Buton pornire
4. Perie flexibilă înlocuibilă
- 4a. Comutatorul de control al rotațiilor
5. Cap perie flexibilă + Capac pentru călătorii
6. Încărcătorul (stația de încărcare)
7. Dispozitiv pentru susținerea periuței de dinți
8. Cablu de alimentare cu ștecher

Important înainte de prima utilizare:







Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire. Păstrați-le pentru a le putea consulta la nevoie sau pentru a le transmite unui alt utilizator. Dispozitivul poate fi folosit doar pentru scopul pentru care este destinat, în concordanță cu aceste instrucțiuni de utilizare. Țineți cont de instrucțiunile de siguranță. Dispozitivul nu funcționează dacă acumulatorul nu este încărcat. De aceea, înainte de prima utilizare a dispozitivului, periuța electrică trebuie încărcată conform instrucțiunilor de utilizare. Nu încercați să deschideți nicodată corpul periuței electrice – excepție face doar cazul în care aparatul nu mai funcționează și urmează să fie reciclat. Deschiderea corpului periuței electrice distruge aparatul! Orice pretenție de despăgubire pe perioada de garanție nu mai este valabilă dacă periuța electrică a fost deschisă. Dacă doriți, puteți monta pe perete încărcătorul și suportul periuței electrice. Montați șuruburile, fără a le strânge complet.

Încărcarea periuței electrice

Ca să fiți siguri că periuța electrică este complet încărcată, la prima utilizare țineți-o în încărcător pentru 24 de ore. Orice încărcare ulterioară necesită aproximativ 16 ore.

Asigurați-vă că periuța electrică este închisă de câte ori este pusă la încărcat (fig. B).

Când ați terminat de folosit periuța electrică, așezați-o înapoi pe stația de încărcare astfel încât periuța să fie mereu încărcată. Tehnic este imposibil ca periuța electrică să ajungă la supraîncărcare.

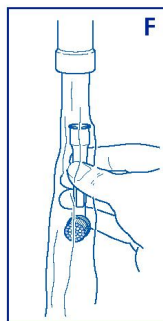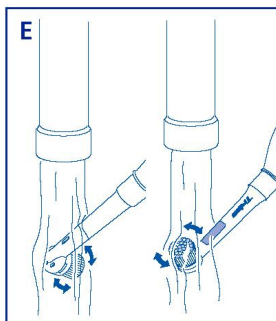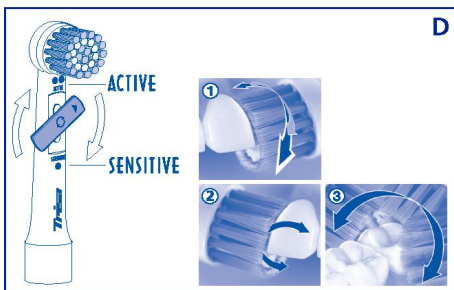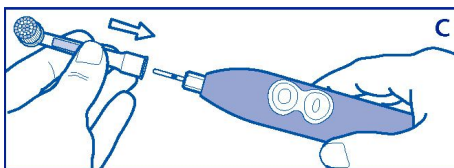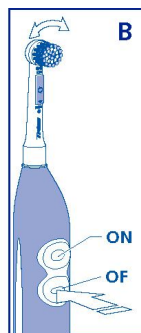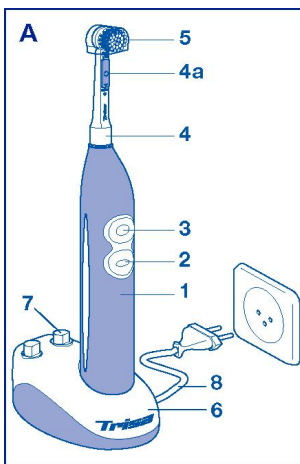

IMPORTANT!

Descărcați complet acumulatorul cel puțin o dată la 6 luni folosind periuța electrică fără a o reîncărca. Această măsură va garanta acumulatorului eficiență maximă și viață îndelungată.

Curățarea corespunzătoare a dinților

Luați periuța electrică din stația de încărcare și atașați periuța detașabilă, împingând-o ușor. Asigurați-vă că partea cu perii este întodeauna pe aceeași parte cu întrerupătoarele (**fig. C**). Periuța detașabilă trebuie să se fixeze fără a folosi forța. Dacă nu reușiți din prima încercare, porniți periuța electrică și apoi încercați să montați periuța detașabilă în timp ce aceasta funcționează. Apoi opriți funcționarea periuței de dinți electrice.

Selectați modul de periaj dorit (**fig. D**): modul **ACTIVE** recomandat gingiilor normale și modul **SENSITIVE** pentru gingii sensibile. La modul **SENSITIVE** viteza de rotație a capului este mai mică decât pe modul **ACTIVE**. De aceea modul **SENSITIVE** este recomandat în special gingiilor sensibile. Înmuiați periuța și aplicați pasta de dinți dorită. Așezați capul periuței pe dinte și apăsați butonul de pornire. Începeți periajul curățând partea exterioară a dintelui din spate (ca în **fig. D1**). Folosind o mișcare circulară blândă, ghidați periuța de câteva ori începând din centrul dintelui spre stânga și spre dreapta și în spațiile interdentare. Perii periuței vor atinge acum marginile gingiei, masând-o. După ce ați curățat suprafețele exterioare, curățați și suprafețele interioare (ca în **fig. D2**) și terminați periajul curățând suprafețele de masticare (ca în **fig. D3**). Forma concavă patentată a perilor **TRISA DENTAL FORM** se adaptează perfect formei naturale a dinților. Aceasta înseamnă că toate suprafețele dinților și în special suprafețele interdentare sunt curățate cu atenție în cel mai bun mod posibil.

Acordați cel puțin 2 minute pentru curățarea dinților, conform recomandărilor medicilor stomatologi. Țineți minte în timpul periajului să acordați aceeași grijă deosebită curățării fiecărui dinte.

După ce ați terminat curățarea dinților, opriți periuța electrică înainte de a o scoate-o din gură.

Folosind zilnic aceeași metodă vă veți familiariza cu utilizarea aparatului și veți avea în scurt timp convingerea că reușiți să vă îngrijiți cu succes dinții și gingia.

Înlocuirea capului periuței electrice

Din motive igienice, se recomandă schimbarea capului de periuță la maxim fiecare 3 luni.

Orice cap oscilant marca Trisa se potrivește periuței Dvs. Seturi de rezervă găsiți la magazinele de specialitate.

Curățarea aparatului.

După fiecare utilizare, pentru a asigura funcționarea igienică și corectă, porniți dispozitivul și clătiți capul periei sub un jet de apă caldă (**fig. E**). Curățați foarte bine peria flexibilă detașabilă (**fig. F**).

Scoateți din priză încărcătorul înainte de a-l curăța. Curățați încărcătorul cu o cârpă moale și ușor umezită. Nu folosiți agenți abrazivi și soluții chimice!

Instrucțiuni de siguranță

Alegeți un loc stabil pentru încărcător, ferit de posibilitatea de a cădea în lichide.

Conectați stația de încărcare numai la prize de curent alternativ de 100-240V~ (**fig. A**). Aparatul poate fi conectat și la priza din baie special destinată pentru aparatele de ras electrice.

Nu utilizați încărcătorul lângă cada de baie cu apă, bazine cu apă sau alte containere cu lichide.

Nu introduceți încărcătorul în lichide!

Scoateți din priză încărcătorul înainte de a-l curăța. Aparatul trebuie scos din priză trăgând de ștecher și nu de cordonul de alimentare; nu răsuciți cablul. Nu scoateți aparatul din priză dacă aveți mâinile umede.

Acest aparat nu este destinat a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale. Utilizatorii fără experiență și care nu cunosc aparatul, sau cei cărora nu li s-au dat instrucțiunile pentru utilizator, trebuie să fie supravegheați de o persoană care răspunde de siguranța lor.

Înainte de orice utilizare, verificați starea aparatului și a cablului de alimentare pentru ca acesta să nu prezinte crăpături sau orice alte deteriorări. Dacă există o problemă de orice fel, nu folosiți aparatul. Nu utilizați aparatul dacă cordonul de alimentare este deteriorat. Cordonul de alimentare nu trebuie să intre în contact cu obiecte fierbinți sau ascuțite. Apelați la un Service autorizat TRISA pentru a verifica și/sau repara aparatul. Nu reparați singur aparatul.

Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului sau din repararea de către persoane neautorizate.

Atenție! Deschiderea corpului periuței electrice distruge aparatul! Orice pretenție de despăgubire pe perioada de garanție nu mai este valabilă dacă periuța electrică a fost deschisă!

Acest aparat corespunde directivelor UE cu nr. 89/336/EEC și 72/23/EEC.

Garanția pentru acest aparat este de 2 ani, calculată de la data vânzării. Prestarea serviciului de garanție constă în înlocuirea sau repararea unui aparat care prezintă defecte materiale sau de fabricație. Serviciul de garanție nu este prestat în cazul uzurii normale, a utilizării abuzive sau necorespunzătoare, în cazul modificării stării originale a aparatului sau în cazul deteriorării aparatului de utilizator sau de persoane terțe, în cazul pagubelor cauzate de condiții externe sau de baterii. Serviciul de garanție este prestat numai în cazul în care produsul deteriorat este însoțit de fișa de garanție datată și semnată de unitatea de la care a fost achiziționat produsul. Dacă aparatul va fi trimis spre reparare de către Cumpărător, acesta va anexa la aparat chitanța originală primită în momentul achiziției



Indicații pentru protecția mediului înconjurător

Acestă periuță electrică conține baterii reîncărcabile. Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoierul menajer! Vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual.