

Prezentare produs (fig. A)

1. Periuță flexibilă (înlocuibilă)
- 1a. Suport cap periuță (înlocuibil)
- 1b. Cap periuță (înlocuibil)
- 1c. Comutator rotativ "Sensitive/Active"
2. Buton pornire
3. Buton oprire
4. Capac baterie

Important înainte de prima utilizare:

Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire. Păstrați-le pentru a le putea consulta la nevoie sau pentru a le transmite unui alt utilizator. Aparatul poate fi folosit doar pentru scopul pentru care este destinat, în concordanță cu aceste instrucțiuni de utilizare.

Important

Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului, nerespectarea instrucțiunilor de utilizare, manipularea necorespunzătoare sau datorate reparării de către persoane neautorizate și necalificate.

Acest aparat nu este destinat a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale. Utilizatorii fără experiență și care nu cunosc aparatul, sau cei cărora nu li s-au dat instrucțiunile pentru utilizator, trebuie să fie supravegheați de o persoană care răspunde de siguranța lor.

Curățarea corespunzătoare a dinților

Selecți modul de periaj dorit (fig. B): modul **ACTIVE** recomandat gingiilor normale și modul **SENSITIVE** pentru gingii sensibile. Pe modul **SENSITIVE** viteza de rotație a capului este mai mică decât pe modul **ACTIVE**. De aceea modul **SENSITIVE** este destinat special gingiilor sensibile. Înmuiați periuța și aplicați pasta de dinți dorită. Așezați capul periuței în centrul suprafeței exterioare a primului dinte de pe maxilarul superior drept.

Notă


Pentru copii poziția de start și secvența de curățare a dinților este diferită (vezi mai jos).

Asigurați-vă că perii nu ating la început gingia. Un spațiu mic trebuie lăsat între peri și gingie.

Porniți aparatul, apăsând butonul de pornire (fig. C).

Forma concavă patentată a perilor **TRISA DENTAL FORM** se adaptează perfect formei naturale a dinților.

Folosind o mișcare circulară blândă, ghidați

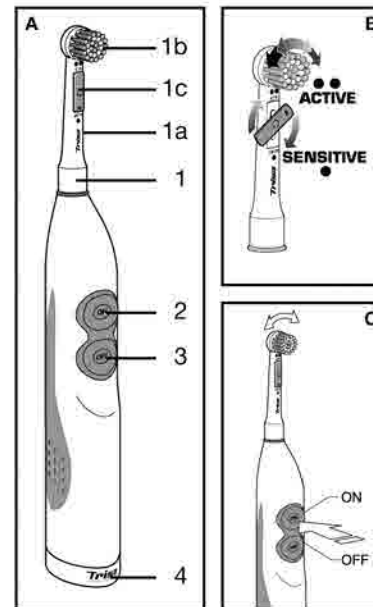

Prezentare produs (fig. A)

1. Periuță flexibilă (înlocuibilă)
- 1a. Suport cap periuță (înlocuibil)
- 1b. Cap periuță (înlocuibil)
- 1c. Comutator rotativ "Sensitive/Active"
2. Buton pornire
3. Buton oprire
4. Capac baterie

Important înainte de prima utilizare:

Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire. Păstrați-le pentru a le putea consulta la nevoie sau pentru a le transmite unui alt utilizator. Aparatul poate fi folosit doar pentru scopul pentru care este destinat, în concordanță cu aceste instrucțiuni de utilizare.

Important

Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului, nerespectarea instrucțiunilor de utilizare, manipularea necorespunzătoare sau datorate reparării de către persoane neautorizate și necalificate.

Acest aparat nu este destinat a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale. Utilizatorii fără experiență și care nu cunosc aparatul, sau cei cărora nu li s-au dat instrucțiunile pentru utilizator, trebuie să fie supravegheați de o persoană care răspunde de siguranța lor.

Curățarea corespunzătoare a dinților

Selecți modul de periaj dorit (fig. B): modul **ACTIVE** recomandat gingiilor normale și modul **SENSITIVE** pentru gingii sensibile. Pe modul **SENSITIVE** viteza de rotație a capului este mai mică decât pe modul **ACTIVE**. De aceea modul **SENSITIVE** este destinat special gingiilor sensibile. Înmuiați periuța și aplicați pasta de dinți dorită. Așezați capul periuței în centrul suprafeței exterioare a primului dinte de pe maxilarul superior drept.

Notă

Pentru copii poziția de start și secvența de curățare a dinților este diferită (vezi mai jos).

Asigurați-vă că perii nu ating la început gingia. Un spațiu mic trebuie lăsat între peri și gingie.

Porniți aparatul, apăsând butonul de pornire (fig. C).

Forma concavă patentată a perilor **TRISA DENTAL FORM** se adaptează perfect formei naturale a dinților.

Folosind o mișcare circulară blândă, ghidați

RO Instrucțiuni de utilizare

Unic importator în România:

ZASS Romania srl (CUI: RO15328988)

547605, Ungheni nr. 40 A, jud. Mureș

Tel.: 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670

e-mail: office@zass.ro, www.zassromania.ro,

www.trisaelvetia.ro office@zass.ro, office@trisaelvetia.ro

Producător: TRISONIC, ELVEȚIA
PRODUS FABRICAT ÎN ELVEȚIA

RO Instrucțiuni de utilizare

Unic importator în România:

ZASS Romania srl (CUI: RO15328988)

547605, Ungheni nr. 40 A, jud. Mureș

Tel.: 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670

e-mail: office@zass.ro, www.zassromania.ro,

www.trisaelvetia.ro office@zass.ro, office@trisaelvetia.ro

Producător: TRISONIC, ELVEȚIA
PRODUS FABRICAT ÎN ELVEȚIA

periuța de câteva ori începând din centrul dintelui spre stânga și dreapta și în spațiile interdentare, apoi repetați. Perii periuței vor atinge acum marginile gingiei, masând-o. După curățarea primului dinte, depărtați ușor periuța și poziționați-o în mijlocul dintelui următor, păstrând un spațiu mic între peri și gingie. După ce ați curățat suprafețele exterioare din maxilarului superior drept, treceți la curățarea suprafeței dinților din maxilarului superior stâng, apoi treceți la maxilarul inferior (tot de la dreapta la stânga). Apoi curățați și suprafețele interioare ale dinților din maxilarului superior și cel inferior. Terminați periajul curățând suprafețele de masticare ale dinților din ambele maxilare.

Secvența de curățare pentru copii: Întâi curățați suprafețele de masticare ale dinților, apoi suprafața exterioară și în final suprafața interioară a dinților.

După ce ați terminat curățarea dinților, opriți periuța electrică înainte de a o scoate-o din gură. Folosind zilnic aceeași metodă vă veți familiariza cu utilizarea aparatului și veți avea în scurt timp convingerea că reușiți să vă îngrijiți cu succes dinții și gingia.

Acordați cel puțin 2 minute pentru curățarea dinților, conform recomandărilor medicilor stomatologi. Țineți minte ca în timpul periajului să acordați aceeași grijă deosebită curățării fiecărui dinte.

Înlocuirea capului periuței electrice

Din motive igienice, se recomandă schimbarea capului de periuță la maxim fiecare 3 luni.

De asemenea, pentru a asigura o funcționare corectă, se recomandă schimbarea suportului capului de periuță la fiecare 6 luni.

Orice cap oscilant marca Trisa se potrivește periuței Dvs. Seturi de rezervă găsiți la magazinele de specialitate.

Demontați periuța de pe suportului capului de periuță (**fig. D**). Fixați noul cap de periuță în așa fel încât clemele de pe suportul capului de periuță să se potrivească cu creștăturile din capul de periuță. Apoi presătați ușor până se aude un click (**fig. E**). Atunci când schimbați capul de periuță, curățați și orice urmă de pastă de dinți de pe suportul capului de periuță.

Curățarea aparatului.

După fiecare utilizare, pentru a asigura funcționarea igienică și corectă, porniți dispozitivul și clătiți capul periei sub un jet de apă caldă (**fig. F**). Curățați foarte bine peria detașabilă (**fig. G**).

Nu folosiți agenți abrazivi și soluții chimice!

Înlocuirea bateriilor

Modelul Trisa "Battery" funcționează cu **2 baterii 1,5V AA (LR6) alcaline**. Un set de baterii este suficient pentru aproximativ 250 de utilizări în condiții normale. Pentru înlocuirea bateriilor țineți mânerul și desfaceți capacul (**fig. H**). Introduceți bateriile noi (**fig. H**) și fixați capacul la locul său.

Din motive de protecția mediului, duceți bateriile uzate la un punct de colectare specializat. Vă mulțumim!

Garanția

Garanția pentru acest aparat este de 2 ani, calculată de la data vânzării. Prestarea serviciului de garanție constă în înlocuirea sau repararea unui aparat care prezintă defecte materiale sau de fabricație. Serviciul de garanție nu este prestat în cazul uzurii normale, a utilizării abuzive sau necorespunzătoare, în cazul modificării stării originale a aparatului sau în cazul deteriorării aparatului de utilizator sau de persoane terțe, în cazul pagubelor cauzate de condiții externe sau de baterii și în cazul utilizării profesionale (non-casnice). Serviciul de garanție este prestat numai în cazul în care produsul deteriorat este însoțit de fișa de garanție datată și semnată de unitatea de la care a fost achiziționat produsul. Dacă aparatul va fi trimis spre reparare de către Cumpărător, acesta va anexa la aparat și chitanța originală primită în momentul achiziției.

Acest aparat corespunde directivelor UE cu nr. 89/336/EEC.

Apelați întotdeauna la un Service autorizat TRISA pentru a verifica și/sau repara aparatul. Nu reparați singur aparatul. Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului sau din repararea de către persoane neautorizate.



Indicații pentru protecția mediului înconjurător

Acestă periuță electrică conține baterii. Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual.

periuța de câteva ori începând din centrul dintelui spre stânga și dreapta și în spațiile interdentare, apoi repetați. Perii periuței vor atinge acum marginile gingiei, masând-o. După curățarea primului dinte, depărtați ușor periuța și poziționați-o în mijlocul dintelui următor, păstrând un spațiu mic între peri și gingie. După ce ați curățat suprafețele exterioare din maxilarului superior drept, treceți la curățarea suprafeței dinților din maxilarului superior stâng, apoi treceți la maxilarul inferior (tot de la dreapta la stânga). Apoi curățați și suprafețele interioare ale dinților din maxilarului superior și cel inferior. Terminați periajul curățând suprafețele de masticare ale dinților din ambele maxilare.

Secvența de curățare pentru copii: Întâi curățați suprafețele de masticare ale dinților, apoi suprafața exterioară și în final suprafața interioară a dinților.

După ce ați terminat curățarea dinților, opriți periuța electrică înainte de a o scoate-o din gură. Folosind zilnic aceeași metodă vă veți familiariza cu utilizarea aparatului și veți avea în scurt timp convingerea că reușiți să vă îngrijiți cu succes dinții și gingia.

Acordați cel puțin 2 minute pentru curățarea dinților, conform recomandărilor medicilor stomatologi. Țineți minte ca în timpul periajului să acordați aceeași grijă deosebită curățării fiecărui dinte.

Înlocuirea capului periuței electrice

Din motive igienice, se recomandă schimbarea capului de periuță la maxim fiecare 3 luni.

De asemenea, pentru a asigura o funcționare corectă, se recomandă schimbarea suportului capului de periuță la fiecare 6 luni.

Orice cap oscilant marca Trisa se potrivește periuței Dvs. Seturi de rezervă găsiți la magazinele de specialitate.

Demontați periuța de pe suportului capului de periuță (**fig. D**). Fixați noul cap de periuță în așa fel încât clemele de pe suportul capului de periuță să se potrivească cu creștăturile din capul de periuță. Apoi presătați ușor până se aude un click (**fig. E**). Atunci când schimbați capul de periuță, curățați și orice urmă de pastă de dinți de pe suportul capului de periuță.

Curățarea aparatului.

După fiecare utilizare, pentru a asigura funcționarea igienică și corectă, porniți dispozitivul și clătiți capul periei sub un jet de apă caldă (**fig. F**). Curățați foarte bine peria detașabilă (**fig. G**).

Nu folosiți agenți abrazivi și soluții chimice!

Înlocuirea bateriilor

Modelul Trisa "Battery" funcționează cu **2 baterii 1,5V AA (LR6) alcaline**. Un set de baterii este suficient pentru aproximativ 250 de utilizări în condiții normale. Pentru înlocuirea bateriilor țineți mânerul și desfaceți capacul (**fig. H**). Introduceți bateriile noi (**fig. H**) și fixați capacul la locul său.

Din motive de protecția mediului, duceți bateriile uzate la un punct de colectare specializat. Vă mulțumim!

Garanția

Garanția pentru acest aparat este de 2 ani, calculată de la data vânzării. Prestarea serviciului de garanție constă în înlocuirea sau repararea unui aparat care prezintă defecte materiale sau de fabricație. Serviciul de garanție nu este prestat în cazul uzurii normale, a utilizării abuzive sau necorespunzătoare, în cazul modificării stării originale a aparatului sau în cazul deteriorării aparatului de utilizator sau de persoane terțe, în cazul pagubelor cauzate de condiții externe sau de baterii și în cazul utilizării profesionale (non-casnice). Serviciul de garanție este prestat numai în cazul în care produsul deteriorat este însoțit de fișa de garanție datată și semnată de unitatea de la care a fost achiziționat produsul. Dacă aparatul va fi trimis spre reparare de către Cumpărător, acesta va anexa la aparat și chitanța originală primită în momentul achiziției.

Acest aparat corespunde directivelor UE cu nr. 89/336/EEC.

Apelați întotdeauna la un Service autorizat TRISA pentru a verifica și/sau repara aparatul. Nu reparați singur aparatul. Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului sau din repararea de către persoane neautorizate.



Indicații pentru protecția mediului înconjurător

Acestă periuță electrică conține baterii. Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual.